

SPECTRA DUAL S



Augstākās klases elektriskais piena pumpis
Lietošanas instrukcija


speCtra

Saturs

1. Svarīgi drošības norādījumi	5
2. Svarīgi simboli	7
3. Lietošanas norādījumi	
4. Sastāvdaļas un montāža	8
5. Displejs	11
6. Vadības pogas	
7. Piena atslaukšanas rokasgrāmata 1	12
8. Darba sākšana	
9. Kā lietot dubulto piena pumpi	15
10. Tīrīšana un dezinfekcija	

11. Cik ilgi drīkst uzglabāt mātes pienu?	-----	16
12. Kā atkausēt un lietot uzglabāto mātes pienu?	-----	17
13. Nakts apgaismojums		
14. Problēmu novēršana:	-----	18
15. Lietošanas un glabāšanas vide		
16. Specifikācijas	-----	19
17. Ierobežota garantija		
18. EMC	-----	20

Vienkāršs un moderns stils

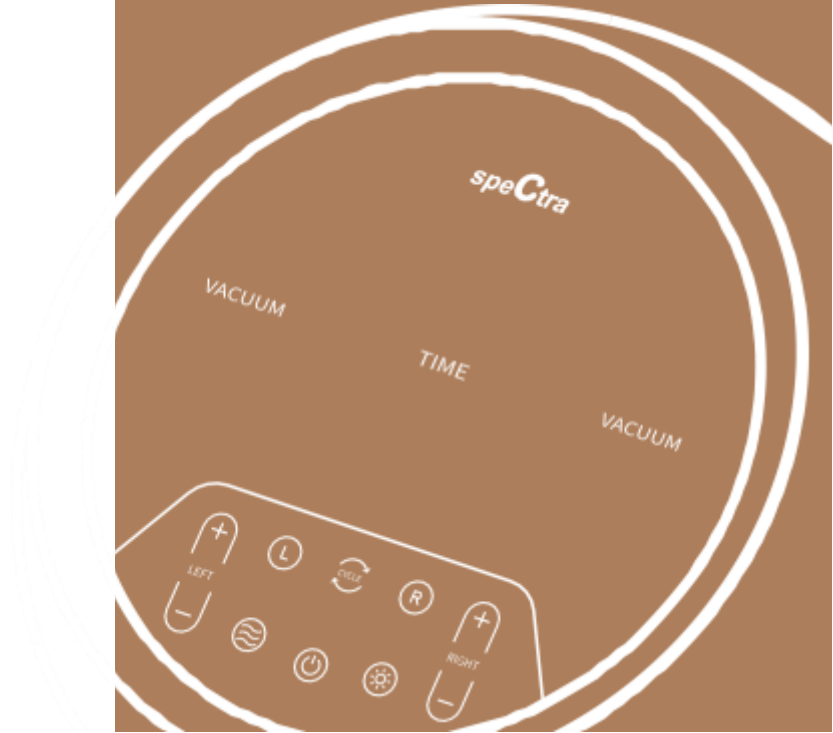



Augstākās klases elektriskais piena pumpis

SPECTRA DUAL S

1. SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Lietojot elektropreces, jo īpaši, ja tuvumā atrodas bērni, vienmēr jāievēro drošības pamata pasākumi.

1 Ja esat māte, kas ir inficēta ar B hepatītu, C hepatītu vai cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV), atslaucot mātes pienu, netiks samazināts vai novērsts vīrusa pārnesšanas risks bērnam.

2 Pirms katras lietošanas reizes vizuāli pārbaudiet, vai piena pumpja daļas nav saplaisājušas, ielūzušas, ieplīsušas, mainījušas krāsu vai nolietojušas.

Ja tiek konstatēti ierīces bojājumi, lūdzu, pārtrauciet tās lietošanu līdz konkrētās daļas ir nomainītas.



PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU.

Elektrisko ierīču lietošanas laikā vienmēr ir jāievēro pamata drošības norādījumi. Šis ir produkts, kas paredzēts vairākiem lietotājiem.



Lai samazinātu elektrotraumas risku.

1 NELIETOJIET MAZGĀŠANĀS LAIKĀ.

2 NENOVIETOJIET VAI NEGLABĀJIET IZSTRĀDĀJUMU VIETĀS, KUR TAS VAR NOKRIST VAI TIKT AIZĶERTS.

3 NELIECIET VAI NEMETIET TO ŪDENĪ VAI CITĀ ŠĶIDRUMĀ.

4 NESNIEDZIETIES PĒC IERĪCES, KAS IR IEKRITUSI ŪDENĪ, NEKAVĒJOTIES ATVIENOJIET IERĪCI NO TĪKLA.

5 NEDEZINFICĒJIET KOMPLEKTU MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ, NEKAD NEIEGREMDĒJIET GALVENO KORPUSU ŪDENĪ.



Lai samazinātu apdegumu, elektrotraumu, aizdegšanās vai savainošanās risku.

- 1 ŠO IERĪCI NEDRĪKST ATSTĀT BEZ UZRAUDZĪBAS, JA TĀ IR PIEVIENOTA STRĀVAI.
- 2 NEPIECIEŠAMA CIEŠA UZRAUDZĪBA, JA ŠO IERĪCI LIETO ZĪDAIŅU VAI BĒRNU TUVUMĀ.
- 3 IZMANTOJIET ŠO IERĪCI TIKAI PAREDZĒTAJAM LIETOŠANAS MĒRĶIM, KĀ TAS APRAKSTĪTS ŠAJĀ INSTRUKCIJĀ.
- NEIZMANTOJIET PIEDERUMUS, KO NAV IETEICIS RAŽOTĀJS UZINMEDICARE CO., LTD.
- 4 NEKAD NELIETOJIET IERĪCI, JA TA IR BOJĀTS VADS VAI KONTAKTDAKŠA.
NELIETOJIET IERĪCI, JA TĀ NEDARBOJAS PAREIZI, JA TĀ IR BIJUSI NOKRITUSI, IR BOJĀTA, KĀ ARĪ, JA TĀ NONĀKUSI SASKARĒ AR ŪDENI VAI JA IR BOJĀTAS VAI TRŪKST KĀDAS DETALĀS.
- 5 TURJET VADU TĀLĀK NO KARSTĀM VIRSMĀM.
- 6 NEKAD NELIETOJIET MIEGA LAIKĀ VAI JA JŪTĀTIES MIEGAINA.
- 7 NELIETOJIET ĀRPUS TELPĀM VAI VIETĀS, KUR TIEK IZMANTOTI AEROSOLA IZSMIDZINĀMIEM PRODUKTI VAI KUR TIEK IEVADĪTS SKĀBEKLIS.
- 8 MAIŅSTRĀVAS/LĪDZSTRĀVAS ADAPTERA VADS JĀATVIENO NO KONTAKTLIGZDAS, JA IERĪCE NETIEK LIETOTA.
- 9 NEIZJAUCIET VAI NEPĀRVEIDOJIET IERĪCI.
- 10 Neieelpojiet/nenorijiet sīkās detaļas.
- 11 Iespējamās alerģiskas reakcijas.
- 12 Pūkas, putekļi, gaisma (tostarp saules gaisma) utt. var negatīvi ietekmēt drošību un būtisko veiktspēju.
- 13 Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapterim lietošanas laikā jābūt viegli atvienojamam.

Ja lietošanas laikā jūtat sāpes krūtī vai krūtsgalā, izslēdziet pumpi vai atvienojiet adapteri un noņemiet ierīci no krūts. Konsultējieties ar savu veselības aprūpes speciālistu (piena atslaukšanu var pārtraukt, ievietojot pirkstu starp krūti un pumpja vāciņu vai izslēdzot pumpi).

2. Svarīgi simboli

	Vispārējā darbības zīme		Bīstamība, brīdinājums		Vispārējā aizlieguma zīme
	Tips BF		DC (līdzstrāva)		Klase II
	Ieslēgšana / Izslēgšana		Skatiet IFU		Ražotājs
	Transportēšana / glabāšana / darbības mitrums		Darbības temperatūra		Darbības atmosfēras spiediens
	Trausls		Uzglabāt sausā vietā		Sērijas numurs
	Izgatavošanas datums		Šo produktu nedrīkst utilizēt kopā ar citiem komerciāliem atkritumiem		Nelikt vienu virs otra
	Kvalitātes sistēma		Eiropas pārstāvēniecība		CE sertifikāts logo

3. Lietošanas indikācija/mērķis

Spectra dual S ir piena pumpis, kas paredzēts sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, lai stimulētu, atslauktu un savāktu pienu no krūtīm. Elektriskais piena pumpis var izmantots arī, lai palielinātu plakanus vai uz iekšpusi vērstus krūtsgalus, atvieglojot zīdaiņa barošanu ar krūti. *Spectra dual S* ir paredzēts vairākiem lietotājiem

Pumpja vāciņu komplekts ir paredzēts tikai personīgai lietošanai

- Kontraindikācijas – sievietes, kuras ir inficētas ar B hepatītu, C hepatītu, HIV vai jebkuru citu vīrusu.
- Pacientu grupas – sievietes, kas baro bērnu ar krūti / Dzimums: Sieviete / Vecums: Pieaugušais

4. Sastāvdaļas un montāža

Pirms *Spectra* sērijas piena pumpja pirmās lietošanas reizes dezinficējiet krūts vāciņu komplektu, paturot to 5 minūtes verdošā ūdenī. (Daļas var deformēties, ja tās tiek turētās verdošā ūdenī ilgāk par 5 minūtēm.)

PIEBILDE: (Daļas var atšķirties atkarībā no valsts)



1 Pumpja korpuss



2 Caurules



3 Atpakalplūsma
Aizsargs



4 Krūšu vāciņi



5 Silikona vārsts



6 Pārsegs



7 Vāciņš



8 Pudeliņe



9 Adapteris



10 Uzgalis



11 Hermētisks vāciņš

Brīdinājums

Šie piena pumpju komplekti ir paredzēti vienam lietotājam. Nekad nedalieties ar komplektiem. Ja piena pumpi izmanto arī citas personas, nevis tikai sākotnējais īpašnieks, tas var radīt veselības riskus, ietekmēt ierīces darbības uzticamību un anulēt produkta garantiju. Starp lietošanas reizēm rūpīgi iztīriet piena pumpi.


PIEBILDE: Neturiet verdošā ūdenī ilgāk par 5 minūtēm, jo tas var izraisīt detaļu deformāciju.

○ Kā samontēt pretplūsmas aizsargu




- (1) Ievietojiet balto silikona membrānu apakšējā aizsargā
- (2) Ievietojiet augšējo aizsargu uzstādītajā silikona membrānā

Atveriet vāciņu

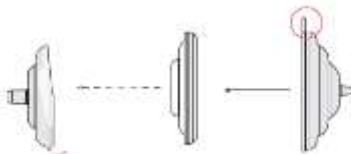


< Apakšējā daļa > < Silikona membrāna > < Augšējā daļa >

○ **Kā samontēt piena pumpja komplektu**

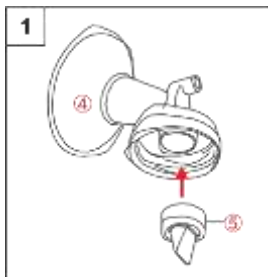

Uzstumiet silikona vārstu (5) uz krūts vāciņa (4)

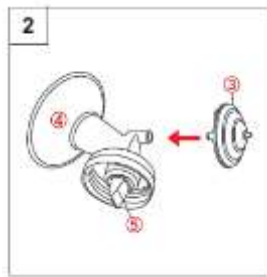

Ievietojiet pretplūsmas aizsargu (3) krūts vāciņā (4)




Pieskrūvējiet pudelīti (6) krūts vāciņam (4)




Ievietojiet caurulīti (2) pretplūsmas aizsargā (3)

5. Displejs

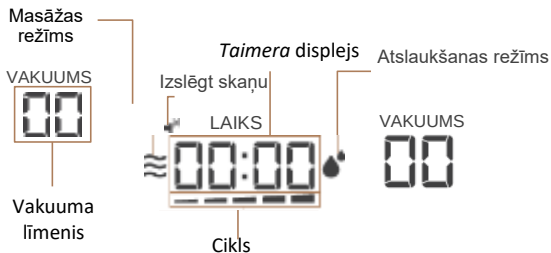

6. Vadības pogas

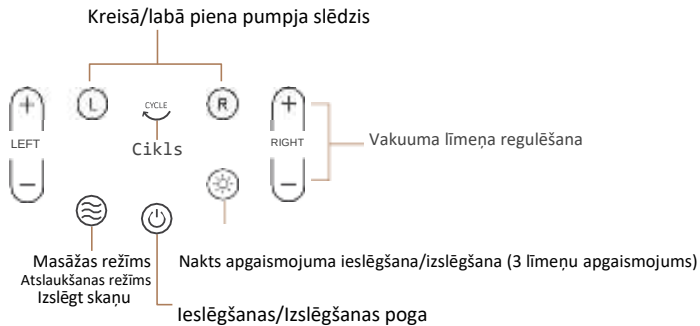

7. Piena atslaukšanas rokasgrāmata

- 1) Atslābinieties un stimulējiet piena tecēšanas refleksu.
 - 2) Pirms lietošanas maigi masējiet krūtis vai uzklājiet siltas kompreses, virzot kustības no krūts pamatnes uz krūtsgalu.
 - 3) Atslauciet pienu no katras krūts 10–15 minūtes; ieteicams krūtis mainīt pamīšus.
Bieža pumpēšana ir efektīvāka un saudzīgāka krūtīm nekā ilgstoša pumpēšana vienā reizē.
(Ik pēc 2–3 stundām, 8 reizes dienā)
- PIEBILDE: PAT TAD, JA IZMANTOJAT PIENA PUMPI, ZĪDIET BĒRNU AR KRŪTI MAKSIMĀLI BIEŽI.

8. Darba sāksana

 1. Novietojiet krūts vāciņu centrā uz krūts tā, lai krūtsgala tiktu iesūkts uzgalīt.	 2. Nospiediet ieslēgšanas pogu. Ekrāns iedegsies un sāks darboties.	 3. Nospiediet pogu "Masāža/Atslai" lai pārslēgtos uz atslaukšanas režīmu, tiklīdz piens sāk tecēt.
 4. Izvēlieties pogu "L" un/vai "R". Pielāgojiet vakuuma līmeni ar pogu "+/-" līdz komforta līmenim. (nekad neuzstādiēt tik augstu, lai radītu diskomfortu)	 5. Kad vēlaties pārtraukt atslaukšanu, nospiediet pogu "jauda/audīgums", pēc tam noņemiet piena savākšanas ierīci no krūts.	 6. Atvienojiet atpakaļplūsmas aizsargu no krūts uzlikas. Noņemiet krūti uzliku no piena savākšanas pudeles, cieši aizveriet pudeli ar vāciņu un droši uzglabājiet.

○ **Vakuuma līmeņa iestatīšana**

Vakuuma līmenis tiek mērīts mmHg uz jūsu piena pumpja un norāda, cik spēcīgi tas “sūc”. Lūdzu, esiet piesardzīgi, iestatot vakuuma līmeni *Spectra dual S* piena pumpim. Dažas sievietes uzskata, ka piena atslaukšana ir ātrāka, ja ir iestatīts augstāks vakuuma līmenis. Tomēr ir svarīgi, lai vakuuma līmenis ir samērīgs un nerada diskomfortu, jo sāpes kavēs piena plūsmu.

Tāpēc iesakām sākt ar zemu vakuuma līmeni un pēc tam pakāpeniski palielināt vakuuma līmeni līdz komfortablām līmenim. Var gadīties, ka jums komfortabls vakuuma līmenis ievērojami mainās atkarībā no dienas, dienas laika un pat vienā un tajā pašā piena atslaukšanas sesijā.

Pielāgojiet vakuuma līmeni, nospiežot  pogas.



○ **Cikla ātruma iestatījumi**

Cikla ātrums jūsu piena pumpī tiek mērīts CPM (ciklos minūtē) un attiecas uz to, cik reižu pumpis “iesūc” un atlaiž pumpi minūtes laikā. *Spectra Dual S* ir izstrādāts ar dažādiem cikla iestatījumiem, lai jūs varētu atrast sev piemērotāko.

Dažām sievietēm cikla ātruma maiņa var būtiski ietekmēt piena atslaukšanu.

Katra sieviete ir atšķirīga, tāpēc pielāgojiet cikla ātruma iestatījumus, lai atrastu sev piemērotāko ātrumu.

Noregulējiet cikla ātrumu, nospiežot  pogu.



○ **Masāžas un atslaukšanas režīmi.**

- Masāžas režīms: masāžas režīmā jūs varēsiet regulēt vakuuma līmeni, lai atrastu sev piemērotāko.
- Atslaukšanas režīms: pēc tam, kad piens ir sācis tecēt, ierīce sāks darboties lēnākos un dziļākos intervālos, radot spēcīgāku sūkšanu, lai atslauktu pienu. Šajā režīmā ir lēnāks cikla ātrums un augstāks vakuuma līmenis. Lūdzu, pielāgojiet cikla ātruma un vakuuma līmeni atslaukšanas režīmā, lai atrastu sev piemērotāko.


○ **Izslēgt un ieslēgt skaņu**

- Pieskarieties pogai  un turiet to nospiestu 4 sekundes, lai izslēgtu skaņu. Displejā parādīsies skaņas izslēgšanas ikon  ar atbilstošu signālu, un visas skaņas tiks izslēgtas. Pieskarieties pogai  un turiet to nospiestu 4 sekundes, lai ieslēgtu skaņu.

Piezīme

Piena pumpis *Spectra dual S* automātiski atcerēsies jūsu iestatījumus nākamajai sesijai. Ja vēlaties sākt atslaukšanu ar citiem iestatījumiem, kas atšķiras no iepriekšējās sesijas laika iestatījumiem, pirms atslaukšanas uzsākšanas pielāgojiet iestatījumus.

9. Kā lietot dubulto pumpi

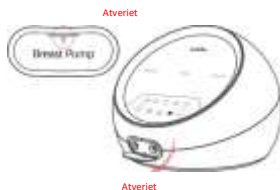

1) Noņemiet vāciņu.



2) Pievienojiet caurulītes no katra piena savākšanas komplekta pie gaisa sprausl

10. Tīrīšana un dezinfekcija

1) Pirmajā lietošanas reizē

- Pirms *Spectra dual S* piena pumpja pirmās lietošanas reizes dezinficējiet visas detaļas (izņemot caurulītes un pumpja korpusu), uz 5 minūtēm ievietojot tās verdošā ūdenī.

- 1 Atvienojiet visas detaļas, kas nonāk saskarē ar krūti un mātes pienu.
- 2 Izvēlieties pietiekami lielu katlu, lai visas detaļas varētu tajā ievietot, nespiežoties cita pret citu.
- 3 Piepildiet katlu ar tik daudz ūdens, lai tas nosegtu visas detaļas, un vāriet 5 minūtes.
- 4 Ar knaiblēm uzmanīgi izņemiet katru detaļu un nolieciet uz tīra papīra dvieļa.
- 5 Pirms uzglabāšanas ļaujiet kārtīgi tām kārtīgi nožūt.
- 6 Kad detaļas ir sausas, samontējiet piena pumpi pirms uzglabāšanas vai lietošanas.

Avots: <https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/healthychildcare/infantfeeding/cleansanitize.html>

2) Pēc katras lietošanas reizes

- 1 Izjauciet un nomazgājiet visas piena pumpja komplekta detaļas, kas nonāk saskarē ar krūti un mātes pienu (krūts vāciņa komplekts, silikona vārsts, uzgalis, vāciņš, disks un vāks), siltā ūdenī, kam pievienots mazgāšanas līdzeklis.

Visas piena pumpja komplekta detaļas drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

- 2 Noskalojiet tīrā ūdenī.

- 3 Ļaujiet nožūt un pārklājiet detaļas, kad tās netiek lietotas.

Piezīme

Lai novērstu kondensāta vai piena nokļūšanu gaisa caurulē, to nekavējoties nomazgājiet un nosusiniet.

Lai notīrītu galveno korpusu, noslaukiet to ar tīru, mitru drānu.

Pārbaudiet, vai caurulītē nav kondensāta vai piena. Ja gaisa caurulē ir kondensāts vai piens, nekavējoties nomazgājiet un nosusiniet to vai nomainiet cauruli.

11. Cik ilgi drīkst uzglabāt mātes pienu?**Istabas temperatūrā**

Temperatūra	Uzglabāšanas laiks
15 °C (60 °F)	24 stundas
26 °C (79 °F)	4–6 stundas
30 °C (86 °F)	4 stundas

Ledusskapī

Temperatūra	Uzglabāšanas laiks
0 °C – 4 °C (32 °F – 39 °F)	Līdz 8 dienām

Saldētavā

Tips	Uzglabāšanas laiks
Nodalījums Ievietots ledusskapī	Līdz 2 nedēļām
Noslēgts Apakšējā, augšējā, blakus vai atsevišķi stāvoša saldētava	3–4 mēneši.
Dzīlā saldētava Ar pastāvīgu -17 °C (0 °F) temperatūru	6–12 mēneši.

12. Kā atkausēt un lietot uzglabāto mātes pienu?

- Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet datumu uz piena konteineru. Neizmantojiet pienu, kam nav norādīts atslaukšanas datums vai kas uzglabāts pārāk ilgi.
- Atkausējiet saldētu pienu ledusskapī vai vēsā, tekošā ūdenī.
- Uzsildiet pienu siltā, tekošā ūdenī un ik pa laikam viegli pagroziet piena konteineru, lai piens sajauktos.
- Ja nav pieejams silts ūdens, uzkarsējiet pannu ar ūdeni uz plīts. Kad ūdens ir silts, bet ne verdošs, noņemiet pannu no plīts un ievietojiet tajā piena konteineru. Nekad nesildiet piena konteineru tieši uz plīts.
- Nekad nesildiet mātes pienu mikroviļņu krāsnī, jo mikroviļņu krāsnis pienu var uzsildīt nevienmērīgi, radot apdedzināšanās risku jums vai bērnam..
- Vienmēr pārbaudiet uz plaukšanas locītavas iekšpuses piena temperatūru, pirms barojat bērnu. Pienam jābūt siltam, nevis karstam.
- Pēc atkausēšanas piens jāuzglabā ledusskapī ne ilgāk kā 24 stundas.
- Nekad atkārtoti nesasaldējiet atkausētu pienu. Izmetiet iepriekš sasaldētu pienu, kas nav izmantots 24 stundu laikā.


13. Nakts apgaismojums

- Inovatīvais iebūvētais LED apgaismojums ļauj izvēlēties vienu no trim apgaismojuma līmeņiem, lai, atslaucot pienu, vienmēr būtu pieejams gaismas avots, kas netraucē mazulim.


14. Problēmu novēršana:

Nosacījums	Iespējamie cēloņi	Pārbaudes	Risinājumi
Nav jaudas	Adapteris	Pārbaudiet, vai strāvas vads pievienots un vai nav bojāts.	Iespraudiet kontaktligzdā, ja nav pievienots. Ja tas ir bojāts, sazinieties ar ražotāju, servisa centru vai vietu, kur ierīci iegādājāties.
Zems iesūkšanas līmenis	Gaisa caurule	Pārbaudiet, vai caurules ir savienotas ar galveno korpusu.	Pievienojiet gaisa cauruli galvenajam korpusam.
	Vakuuma līmenis	Pārbaudiet, vai vakuuma regulatora vārsta vakuuma līmenis ir zems, vai ir neparasts trokšnis.	Sazinieties ar vietu, kur iegādājāties produktu, vai ar ražotāju.
	Bojāts montāžas komplekts	Pārbaudiet komplekta savienojuma vietas.	Izjauciet un atkal samontējiet to.
	Krūts vāciņš/uzlika	Pārbaudiet, vai nav problēmas ar krūts vāciņu/uzliku.	Iegādājieties un nomainiet krūts vāciņu/uzliku.
	Vārsts	Pārbaudiet, vai nav bojājumu vārsta uzgali.	Nomainiet vārstu.
Sāpes	Pārāk augsts iesūkšanas līmenis	Pārbaudiet iesūkšanas līmeni.	Iestatiet zemāko sūkšanas līmeni un konsultējieties ar savu laktācijas konsultantu vai ārstu.

15. Lietošanas un glabāšanas vide

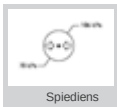

Lietošanas vide

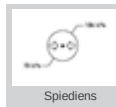

Glabāšanas vide

16. SPECIFIKĀCIJAS

Aizsardzības tips: Klase II

Svars: 1,8 kg, Enerģijas patēriņš. 60 VA

Paredzamais *Spectra dual S* piena pumpja kalpošanas laiks ir 3 gadi.

Jāizmanto šāds adapteris.

Ražotājs: *Dongguan Shilong Fuhua Electronic Co., Ltd.*

Modelis: UES24LCP—120200SPA

Ievade: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 500 mA

Izvade: 12 V = 2A

1. Aizsardzības veids pret elektriskās strāvas triecienu: II klases aprīkojums
2. Aizsardzības pakāpe pret elektriskās strāvas triecienu: BF tipa daļas
3. Klasifikācija pēc aizsardzības pakāpes pret ūdens iekļūšanu: IP22
4. Šī iekārta nav piemērota lietošanai uzliesmojošu anestēzijas līdzekļu vai skābekļa klātbūtnē.
5. Darbības režīms: nepārtraukta darbība

17. IEROBEŽOTA GARANTĪJA

Uzinmedicare Co., Ltd. sniedz šim produktam 2 gadu garantiju sākotnējam mazumtirdzniecības pircējam, garantējot, ka tam nebūs materiālu un izgatavošanas defektu.

Šī garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nelaimes gadījuma, nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas, nepareizas apkopes, neatļautas modifikācijas vai pieslēgšanas pie neatbilstoša barošanas avota dēļ. Par šādu bojājumu novēršanu tiks iekasēta maksa.

Garantijas karte

Izcelsmes valsts: Korejas Republika

Adrese: 54,56, Dongtansandan 5-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18487, Korejas Republika

Tālrunis: +82-70-5228-0983

Spectra dual S elektriskais piena pumpis		Vārds
Tālrunis	Mobilais tālr.	
Adrese		

Utilizēšana

Šis izstrādājums satur elektriskos atkritumus vai elektroniskās iekārtas. To nedrīkst izmantot kā nešķirotus sadzīves atkritumus, un tas ir jāsavāc atsevišķi saskaņā ar piemērojamām valsts vai iestāžu politikām attiecībā uz novecojušām elektroniskām iekārtām.

18. EMC

Šī iekārta jāuzstāda un jānodod ekspluatācijā saskaņā ar lietošanas instrukcijā sniegto informāciju [IEC/EN 60601-1-11:2010 12.3.a punkts]

Bezvadu sakaru iekārtas, piemēram, bezvadu mājas tīkla ierīces, mobilie tālruņi, bezvadu telefoni un to bāzes stacijas, rācjas, var ietekmēt šo ierīci, un tās ir jānovieto vismaz 1,0 m attālumā no šīs ierīces. [IEC/EN 60601-1-11:2010 12.3.b punkts]

Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst medicīnisko ierīču ierobežojumiem saskaņā ar IEC 60601-1-2:2014. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem tipiskās medicīniskās ierīcēs. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un lietota saskaņā ar instrukcijām, var radīt kaitīgus traucējumus citām tuvumā esošajām ierīcēm.

Tomēr nav garantijas, ka konkrētā instalācijā neradīsies traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus citām ierīcēm, kas var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārta, lietotājs tiek aicināts mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šīm darbībām.

– Pārorientējiet vai pārvietojiet uztvērējierīci.

– Palieliniet attālumu starp ierīcēm.

– Pievienojiet ierīci kontaktligzdai ķēdē, kas atšķiras no tās, kurai ir pieslēgta(-as) cita(-as) ierīce(-es).

Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar ražotāju vai nozares servisa tehniķi.



Uzinmedicare Co., Ltd.

54, 56, Dongtansandan 5-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18487, Korejas Republika
Tāl. Nr.: +82-70-5228-0983 /
www.uzinmedicare.com



Obelis s.a

Bd. Gfñfral Wahis, 53, 1030 Brisele, Belģija
Tāl. Nr.: +32(0)2 732 59 54 Fakss: +32(0)2
732 60 03
E-pasts: mail@obelis.net

UZ-IFU-DUALS(EN)/Rev.003/2021.10